



---

**SLIM UP**<sup>®</sup>

**BTS**  
beauty total solution

**THAO**<sup>®</sup>

**OPTOS**<sup>®</sup>

**P E R F E C T**<sup>®</sup>  
T O T A L B O D Y

**[ClubWell]**<sup>®</sup>  
relax for active people



**SUNAWAY** <sup>®</sup>

# ... is ULTRA!

Slim UP® ULTRA è un'apparecchiatura in grado di offrire un ventaglio completo di metodiche che sfruttano energie tra loro sinergiche capaci di trattare le problematiche del corpo in maniera totale. La forza, unica nel settore, di Slim UP® ULTRA, sta proprio nella studiata sinergia delle associazioni, capaci di colpire un problema estetico da più direzioni e con potenza esaltata dalla concordia degli effetti. Aver integrato potenti fonti di ultrasuono ad un insieme infrarosso - elettrostimolazione ampiamente collaudato e sperimentato in ambito scientifico rappresenta una innovazione decisiva in campo estetico. L'estetica professionale ha in questo modo a disposizione uno strumento evoluto, complesso, ma semplicissimo da usare: 16 elettrodi stimolanti adesivi; ben 20 testine attive di ultrasuono distribuite su sole 4 placche facili da posizionare; 6 fonti di infrarosso da distribuire con un braccio mobile ad altezza controllabile; 7 programmi residenti controllabili nelle intensità e nei tempi per lavorare su tutti i principali problemi estetici.


Slim UP® ULTRA è però qualcosa di più anche nel settore ringiovanimento e rassodamento del viso e del corpo attraverso due manipoli che inaugurano strade nuove ed affascinanti di trattamento. Il manipolo viso-corpo sfrutta una emissione di ultrasuoni superficiali a 3 Mhz capaci di concentrare sugli strati cutanei i ben noti effetti trofici, stimolanti, attivanti i fibroblasti. In particolare è però favorita la veicolazione di principi attivi attraverso l'uso di gel formulati specificatamente: principi cosmetici rassodanti e revitalizzanti trovano applicazione nel trattamento antiage del viso, ma anche nel trattamento di zone particolari del corpo, come negli afflosciamenti cutanei dell'interno cosce, delle braccia, della zona ombelicale, della pelle del seno.

Slim UP® ULTRA offers a complete range of treatments which employ synergetic energies for globally treating unsightly body imperfections. The absolutely unique strength of Slim UP® ULTRA lies in a careful and detailed examination of energy associations and their ability to deal with a cosmetic problem from many directions and with power boosted by these concerted effects. By integrating a widely laboratory tested infrared-electro stimulation treatment with strong ultrasound wave sources represents a decisive innovation in the cosmetic industry, giving the professional beautician an advanced, complex yet easy to use tool: 16 adhesive stimulating electrodes; a full 20 active ultrasound heads distributed over just 4 easy to position plates; 6 infrared ray sources distributed through the use of a height adjustable, mobile arm; 7 resident programs which can be controlled in terms of time and intensity to treat the most common cosmetic problems.

But, Slim UP® ULTRA also represents an important advance when it comes to rejuvenating and firming the face and body through two hand pieces which open up new and fascinating horizons in cosmetic treatment. The face-body hand piece takes advantage of the emission of superficial ultrasound waves at 3 Mhz capable of concentrating the well-known stimulating trophic fibroblast activating effects on the skin layers. However, it particularly favours the diffusion of active substances through the use of specifically formulated gels: tonic and revitalising cosmetic ingredients are used in the anti-age face treatment, but also in the treatment of particular areas of the body, like sagging skin on the inner thigh, arms, belly and breast areas.



# SLIM UP<sup>®</sup> ULTRA

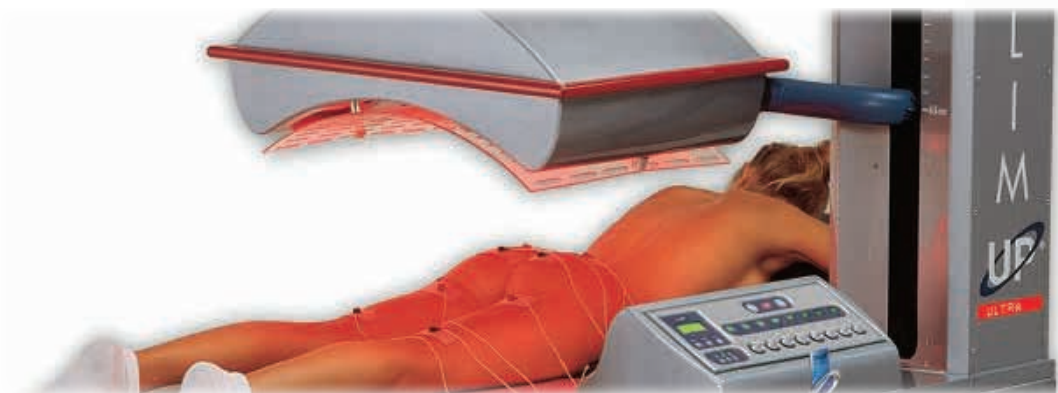

## Programmi di funzionamento

### Programma SLIM

E' un programma che integra infrarosso, ultrasuono ed elettrostimolazione, mirato allo snellimento in presenza di cellulite\* in genere ed in particolare di cellulite\* con adipe diffuso o localizzato. L'uso di frequenze elettrostimolanti mirate alle fibre veloci effettua un lavoro senza ipertrofizzare la muscolatura. La fase ad ultrasuoni innalza in modo decisivo l'effetto degli infrarossi sulle zone più ricche di adipe.

### Programma TONE

E' un programma che sinergizza infrarosso ed elettrostimolazione per ottenere il recupero del tono muscolare e cutaneo (per esempio dopo dimagrimenti rapidi o per sedentarietà) e per la cellulite\* dominata da una perdita di elasticità cutanea. La parte elettrostimolante effettua contrazioni prolungate a frequenze indirizzate soprattutto sulle fibre lente ed intermedie, con conseguente rapido effetto sui volumi muscolari e sulla tonicità dei tessuti.

### Programma MODEL

E' un programma attivo su infrarosso, ultrasuono ed elettrostimolazione. La mobilizzazione muscolare ha due fasi a frequenze medio-basse e medio-alte, in modo da colpire più ampiamente tutti i tipi di fibra e promuovere sia il rassodamento che lo snellimento. L'ultrasuono, in sinergia con l'infrarosso, promuove attivamente la riduzione. E' pertanto un programma indicato nelle situazioni miste, in cui è richiesto sia un effetto riducente che uno modellante, come nelle celluliti\* con perdita di tono e presenza di adipe, oppure nelle celluliti\* di vecchia data con ricchezza di fibre connettivali ed afflosciamenti.

### Programma MASS

E' un programma infrarosso-elettrostimolazione, che nella fase elettrostimolante attiva prevalentemente le fibre muscolari lente ed intermedie, con contrazioni massimali e prolungate, determinando ipertrofizzazioni rapide ed aumento di volumi mirati. Va preferito nel lavoro sui grandi muscoli (perdita di tono dei glutei, sfiancamento dei retti addominali, modellamento e potenziamento delle spalle), quando si voglia rassodare ampiamente o riequilibrare parti corporee tra loro non omogenee.

### Programma LIPOCELL

Permette un lavoro sinergico tra infrarosso, ultrasuono ed elettrostimolazione. Sfrutta intensità di corrente leggera e frequenze molto basse, che hanno massima indicazione nella capillarizzazione, nel miglioramento del microcircolo e del drenaggio. Anche l'ultrasuono è molto delicato, con scopi prettamente trofici, capillarizzanti e ristrutturanti. L'uso principale è pertanto nelle prime fasi della cellulite\*, nelle celluliti\* con iniziale formazione di adipe e nelle celluliti\* linfedematose. E' inoltre utile nelle stasi circolatorie.

### Programma FIBROCELL

E' un programma che integra infrarosso, ultrasuono ed elettrostimolazione per lavorare attivamente sulle forme di cellulite\* persistenti da molto tempo e via via arricchitesi di fibre connettivali che rendono il tessuto fibroso ed anelastico. Sfrutta l'effetto fibrolitico degli ultrasuoni e quindi è indicato anche in quelle forme reattive simil cicatriziali susseguenti a trattamenti di liposcultura o di lecitisi

### Programma MEGASLIM

E' un programma che sfrutta la sinergia ultrasuono-infrarosso, con ben due fasi dedicate all'ultrasuono. E' il più potente trattamento residente mirato agli accumuli adiposi e va pertanto indicato nei casi di adiposità particolarmente accentuata e nelle situazioni caratterizzate da accumuli ben delimitati ma molto fibrosi e sequestrati, come i cuscinetti trocanterici, gli aspetti a banana sottoglutei, le maniglie.

## Function programs

### SLIM Program

A program which integrates infrared, ultrasound and electro stimulation, aimed at slimming in the presence of cellulite\*, in general, and cellulite\* with widespread or localised fat, in particular. The use of electro stimulating frequencies aimed at the fast fibres works without hypertrophying the muscle structure. The ultrasound phase decisively enhances the effect of the infrared rays in the areas richest in fat.

### TONE Program

A program which synergises infrared rays and electro stimulation to obtain improved muscle and skin tone (for example after rapid weight loss or due to a sedentary lifestyle) and for cellulite\* dominated by a loss of skin suppleness. The electro stimulation causes prolonged contractions at frequencies directed mostly on slow and intermediate fibres, resulting in a rapid effect on muscle volumes and on tissue tone.

### MODEL Program

A program based on infrared rays, ultrasound and electro stimulation. The mobilisation of the muscles occurs in two frequencies at medium-low and medium-high frequencies, to more widely act on all types of fibre and to promote both a toning and a slimming effect. Ultrasound, in synergy with infrared rays, actively promotes fat reduction. Therefore it is a program useful in mixed situations, in which both a reducing and a shaping effect are required, as in the case of cellulite\* conditions with loss of tone or presence of fat, or in the case of long term cellulite\* conditions with a surplus of connective fibres and sagging.

### MASS Program

An infrared rays-electro stimulation program which, in the electro stimulation phase prevalently activates the slow and intermediate muscle fibres with maximum, prolonged contractions, thus causing rapid hypertrophy and an increase in targeted volumes. This program is preferred in the treatment of large muscles (loss of tone in the buttocks, relaxed abdominals, shaping and strengthening of the shoulders) when the goal is to globally tone or balance body parts which are not homogeneous.

### LIPOCELL Program

Uses the synergy between infrared rays, ultrasound and electro stimulation. It uses the intensity of light current and very low frequencies which are especially indicated in the capillarization, in improving micro-circulation and drainage. Ultrasound waves are also very delicate with uses that are purely trophic, capillarizing and restructuring. Therefore it is mainly used in the initial phases of cellulite\*, in cellulite\* with initial formation of fat and in lymphedematous cellulite\*. It is also helpful in the case of sluggish circulation.

### FIBROCELL Program

A program which integrates infrared rays, ultrasound and electro stimulation to actively intervene on forms of old, persistent cellulite\* which has slowly accumulated connective fibres which make the tissue fibrous and lacking in resilience. It uses the fibrolytic effect of ultrasound waves and is therefore also indicated in scar-like reactive forms following liposculpture or lecithin treatments.

### MEGASLIM Program

A program which uses ultrasound-infrared synergy, with two complete phases dedicated to ultrasound. It is the most powerful memory resident treatment for fat deposits and is therefore indicated in cases of particularly accentuated adiposity and conditions characterised by well delimited but very fibrous and confined, like trochanteric pads, rolls of fat under the buttocks and "love handles".



®

**SWISS**

# ... STEAM!

## **Radiazioni infrarosse**

- Effetto positivo sul sovrappeso ed obesità in quanto stimolante il metabolismo locale grazie al calore che l'infrarosso riesce a far penetrare in profondità meglio di altre metodiche
- Effetto positivo sugli inestetismi della cellulite\*, per aumento della circolazione, capillarizzazione, ossigenazione e nutrizione locale, aumento della detossificazione e ginnastica vascolare
- Miglior penetrazione dei prodotti cosmetici per aumento della microcircolazione e riduzione della barriera elettrica cutanea
- Effetto detossificante o disintossicante per aumento della sudorazione e della liberazione da farmaci, tossine, inquinanti, ecc
  - Effetto stimolante le difese immunitarie ed antivirali
  - Effetto antalgico o antidolorifico
  - Effetto rilassante muscolare o decontratturante
  - Effetto relax

## **Vapore ed aromi**

- Miglior assorbimento degli aromi per veicolazione con vapore attraverso le ghiandole sudoripare attivate al loro massimo grado e attraverso le ghiandole sebacee liberate dall'ingombro del sebo
- Effetto vasotonico, riducente e rassodante legato alle caratteristiche dei principi attivi aroma

## **Infrared radiations**

- *Beneficial effect on excess of fat and obesity, it stimulates local metabolism thanks to the infrared heating, which penetrates deeper in the body than it does with other methods*
- *Beneficial effect on cellulite\* due to an increasing of circulation, capillarisation, oxygenation and local nutrition, an increasing of detoxification, and vascular gymnastics*
- *Better penetration of cosmetic products due to the increased micro-circulation and to the reduction of the skin electrical barrier*
- *Detoxifying or detoxicant effect due to increased perspiration and the elimination of drugs, toxins, pollutants etc.*
- *Stimulating effect on the immune system and on antiviral defenses*
  - *Analgesic and pain-killing effect*
  - *Muscle relaxing and soothing effect*
  - *Relaxing effect*

## **Steam and aromas**

- *Better absorption of aromas conveyed by steam, through sweat glands which are activated at their most and through sebaceous glands which are freed from sebum*
- *Vessel toning, reducing and firming effect due to the nature of aromatic active principles*



SLIM UP<sup>®</sup> STEAM

**Slim UP® STEAM** é un'apparecchiatura per estetica che abbina l'effetto termico dei raggi infrarossi agli effetti benefici del vapore e dell'aromaterapia; dispone di cinque programmi che alternano e combinano queste funzioni per ottenere un effetto vasotonificante, rassodante e riducente, in base alle necessità; è un apparecchio fondamentale per il trattamento multifattoriale della cellulite\*.

**Slim UP® STEAM** si prende cura dei tuoi clienti con 4 tipi di benefici:

A) un effetto drenante, in caso di ritenzione idrica, edema, cellulite\* linfedematosa, e sovrappeso dato dall'aumento della componente corporea liquida.

B) un effetto riducente in caso di eccessiva presenza di grasso.

C) un effetto benefico in presenza di ogni tipo di cellulite\*, dovuto alla miglior irrorazione ematica locale, al miglior drenaggio, all'allontanamento delle tossine e dei prodotti di rifiuto ed alla lipolisi.

D) un effetto rassodante cutaneo, dovuto alla forte penetrazione di olii essenziali.

*Slim UP® STEAM is a beauty therapy unit combining the thermal effect of infrared rays with the beneficial effects of steam and aromatherapy; it features five programmes alternating and combining these functions for obtaining a vessel toning, firming, reducing and slimming effect according to needs; this is an essential unit for the multi-factor treatment of cellulite\*.*

*Slim UP® STEAM helps your customers in 4 ways:*

*A) a draining effect, in case of water retention, oedema, cellulite\* with lymph-oedemas, and excess weight due to the increase of the body liquid component*

*B) a lipolytic effect in case of excess weight*

*C) a beneficial effect in presence of any kind of cellulite\*, due to a better local vascularization, to the improved drainage, to the elimination of toxins and of waste products and to lipolysis*

*D) skin firming effect, due to the deep penetration of essential oils.*



... FACE!



®  
D  
E  
A  
S  
I  
M  
S

SLIM UP



SLIM UP<sup>®</sup> Face

## Innovativo apparecchio di ultima generazione per il trattamento degli inestetismi del viso.

Programmi preimpostati

### 1 – **Biostim [RF ipertermica + Photobiostimolazione rosso + stimolazione elettrica]**

Questa tipologia di trattamento è stata ideata per avere un netto incremento nel turnover cellulare e quindi la possibilità di accelerare tutti quei fisiologici principi che portano alla generazione di nuovo tessuto epidermico.

### 2 – **Dermaton [Stimolazione elettrica + RF ipertermica + Vacuum + Press]**

Questo protocollo di trattamento è stato ideato per avere uno spiccato effetto tonificante del derma. La geometria più estesa degli elettrodi permette di avere un trattamento diffuso ed avvolgente dei tessuti. Trova quindi una precisa applicazione in tutti quei trattamenti di stimolazione del collagene e di tutte le proteine strutturali endogene.

### 3 – **Mioton [Elettromiostimolazione]**

Tipologia di trattamento studiato per stimolare lo strato muscolare del viso. Al Crono invecchiamento della pelle spesso si associa una perdita di vigoria dello strato muscolare sottostante, con conseguente perdita di tono del viso e formazione di pieghe, rughe e rilassamenti più evidenti. Il trattamento ha un effetto tonificante sulla muscolatura attraverso la stimolazione di precisi punti del viso con correnti appositamente studiate.

### 4 – **Crono Aging [Vacuum + RF ipertermica + Fotobiostimolazione IR ]**

Questo trattamento trova una precisa applicazione in tutti quei casi in cui il fotoinvecchiamento, attraverso la produzione di radicali liberi provoca un ispessimento, una disidratazione un invecchiamento dello strato superficiale della pelle. La sinergia delle tecnologie permette di avere una sommatoria di effetti che concorrono alla massimizzazione della risposta e quindi alla risoluzione dell'inestetismo.

### 5 – **Lifting Face / 6 – Lifting Neck [Matrix RF]**

Trattamento mirato alla risoluzione di problematiche di rilassamento cutaneo importante. La particolare geometria dell'elettrodo e la tipologia di emissione riescono ad evocare un effetto **microneedling**, molto efficace a livello profondo delle strutture collageniche e dei Fibroblasti. Grazie infatti al segnale frazionato ed alla matrice di emissione dell'energia, si riesce a concentrare l'energia a livelli profondi del derma evocando quindi significativi ed immediati effetti di ristrutturazione della pelle, stimolando anche una importante azione ossigenante e rigenerante.

### 7 – **Rebalance [RF atermica + Stimolazione elettrica]**

Programma mirato al riequilibrio dei fattori fisiologici della pelle. Grazie all'utilizzo di due tecnologie si passa da una prima fase dedicata totalmente al riequilibrio ionico del derma e quindi ad un effetto normalizzante ad una seconda fase di nutrimento e idratazione.

### 8 – **Epismooth [RF ipertermica + Stimolazione elettrica]**

La sinergia tra RF ipertermica e microcorrenti permette di avere un trattamento mirato all'attenuazione degli esiti cicatriziali grazie a effetti di rimodellamento del derma e grazie agli effetti di eventuali principi attivi utilizzati: antiossidanti, idratanti, tonificanti. Gli elettrodi utilizzati in questo trattamento riescono a dare un aumento graduale e diffuso dell'energia termica in grado di stimolare efficaci risposte ristrutturanti del derma.

### 9 – **Acute Acne [Fotobiostimolazione Blu + Stimolazione elettrica] [non utilizzabile dall'estetista italiana]**

Trattamento particolarmente mirato alla fase attiva dell'acne. Con l'utilizzo di questo tipo di tecnologia si può effettuare un trattamento sia antibatterico che antiinfiammatorio, infatti sfruttando particolari emissioni di energia luminosa si possono stimolare reazioni chimiche in grado di agire sul batterio responsabile dell'acne (*Propium Bacterium Acnes*), per poi stimolare reazioni antiinfiammatorie della pelle attraverso l'interazione della stimolazione elettrica con le strutture cellulari.

### 10 – **3D UP [RF ipertermica + Matrix RF + Stimolazione elettrica]**

Trattamento mirato a combattere gli inestetismi del volto più marcati. Il procedimento prevede 3 fasi, con l'utilizzo di diverse stimolazioni per sfruttare al meglio la sinergia degli effetti. Fase 1: emissione in media frequenza, attivazione di microcircolo e stimolazione collagenica. Fase 2: emissione in Radiofrequenza frazionata, maggior effetto termico e notevole profondità d'azione. Fase 3: stimolazione in bassa frequenza, incrementa il metabolismo cellulare e permette l'utilizzo di eventuali principi attivi associati per incrementare l'effetto antiossidante.



Preset programs

**1 – Biostim [Hyperthermic RF + RED Photobiostimulation + Electrical Stimulation]**

This type of treatment has been studied to have a clear increase of the cellular turnover and therefore the chance to accelerate all those physiological principles that bring to the generation of new epidermal tissue.

**2 – Dermatone [Electrical Stimulation + Hyperthermic RF + Vacuum + Press]**

This treatment protocol has been studied to obtain a strong tonifying effect of derma. The larger electrodes' geometry permits to obtain a wider and embracing treatment of tissues. So, it is specifically applied in all treatments of collagen and all endogenous structural proteins stimulation.

**3 – Miotone [Electromiostimulation]**

Type of treatment studied to stimulate the face muscular layer. Often, together with chronoageing of the skin it is associated a loss of vigour of the underlying muscular layer, with consequent loss of face tone and formation of folds, wrinkles and more evident relaxations. The aim of the treatment is a tonifying effect on the muscles through the stimulation of specific face points with properly studied currents.

**4 – Crono Aging [Vacuum + Hyperthermic RF + IR Photobiostimulation]**

This treatment is suitable for all those situations where the photoageing, through the production of free radicals, causes a thickening, dehydration and ageing of the superficial layer of the skin. The synergy of the technologies allows to have a sum of effects that contribute to the maximisation of the reply and therefore the resolution of the imperfection.

**5 – Lifting Face / 6 – Lifting Neck [Matrix RF]**

This treatment has been studied to solve important problems of face and décolleté skin relaxation.

The special geometry of the electrode and the type of emission manage to evoke a microneedling effect, very effective in deep level on the collagen and Fibroblasts structures, since for its physical specifications it is able to cross easily the epidermis and the surface structures of derma. In fact, thanks to the fractioned signal and the energy emission matrix, it is possible to concentrate the energy at deep levels of derma by thus evoking significant and immediate effects on skin restructuring, by also stimulating an important oxygenating and regenerating action.

**7 – Rebalance [Athermal RF + Electrical Stimulation]**

Program addressed to the rebalancing of the physiological factors of skin. Thanks to the use of two technologies, there is a first phase totally dedicated to the ionic rebalancing of derma and thus granting a normalizing effect and a second phase of nourishment and hydration.

**8 – Epismooth [Hyperthermic RF + Electrical Stimulation]**

The synergy between RF and microcurrents with vehiculating scope allows to obtain a targeted treatment to the mitigation of scar results thanks to the effects of derma shaping and thanks to the effects of the used active ingredients: antioxidants, moisturizing, tonifying. The electrodes used in this treatment can grant a gradual and widespread increase of the thermal energy, able to stimulate effective restructuring replies of derma.

**9 – Acute Acne [Blue Photobiostimulation + Electrical Stimulation]**

Treatment specially targeted to the active phase of acne. With the application of this type of technology it is possible to make both an antibacterial and anti-inflammatory treatment; in fact, by exploiting special light energy emissions some chemical reactions, able to work on the bacterium responsible of acne

(Propium Bacterium Acnes), and then also stimulating skin anti-inflammatory reactions through the interaction of electrical stimulation.

**10 – 3D UP [Hyperthermic RF + Matrix RF + Electrical Stimulation]**

Treatment targeted to fight the most evident face imperfections. The treatment protocol consists of 3 phases, with the use of different stimulations to better exploit the synergy of the effects. Phase 1: medium frequency emission, microcirculation activation and collagen stimulation. Phase 2: fractional radiofrequency emission, better thermal effect and strong deep action. Phase 3: low frequency stimulation, it increases the cell metabolism and allows the use of possible active ingredients in association to increase the antioxidant effect.

Indicatore luminoso del trattamento attivo  
Active program light



## Manipolo 1

- Testina **A** dimensioni 35x25mm

RF frazionata a matrice di punti di emissione per trattamenti viso

- Testina **B** dimensioni 52x38mm

RF frazionata a matrice di punti di emissione per trattamenti décolleté

**RF MATRIX** (RF Resistiva , Matrice di punti di emissione)

La particolare geometria dell'elettrodo e la tipologia di emissione riescono ad evocare un effetto microneedling, molto efficace a livello profondo delle strutture collageniche e dei Fibroblasti, poiché per sue caratteristiche fisiche riesce ad oltrepassare facilmente l'epidermide e le strutture superficiali del derma concentrandone l'effetto. Grazie infatti al segnale frazionato ed alla matrice di emissione dell'energia, si riesce a concentrare l'energia a livelli profondi del derma evocando quindi significativi ed immediati effetti di ristrutturazione della pelle, stimolando anche una importante azione ossigenante e rigenerante.

- Testina **C** dimensioni 35x25mm

Led IR + RF ipertermica / RF atermica / Stimolazione elettrica

- Testina **D** dimensioni 35x25mm

Led Rosso + RF ipertermica / RF atermica / Stimolazione elettrica

- Testina **E** dimensioni 35x25mm

Led Blu + RF ipertermica / RF atermica / Stimolazione elettrica

-Testina **F** dimensioni 35x25mm

RF ipertermica / RF atermica / Stimolazione elettrica

**Fotobiostimolazione IR** (890nm)

Emissione luminosa in grado di penetrare in profondità nei tessuti, utilizzata per generare un effetto diatermico profondo in grado di stimolare il metabolismo cellulare, favorendo il turn-over cellulare.

**Fotobiostimolazione RED** (610nm) [non utilizzabile dalle estetista italiane]

Particolare emissione luminosa in grado di interagire con meccanismi cellulari determinando un incremento di tutte le attività volte al miglioramento del trofismo della pelle, promuovendo la fotostimolazione di particolari proteine mitocondriali.

**Fotobiostimolazione BLU** (420nm) [non utilizzabile dalle estetista italiane]

Particolari emissioni elettromagnetiche in grado di avere un'azione battericida anche verso gli organismi responsabili dell'acne. La luce Blu/Violetta infatti provoca una reazione di fotosensibilizzazione delle porfirine producendo ossigeno e quindi avendo un'azione antibatterica.

**RF ipertermica** (RF Resistiva Bipolare)

Innovativa tecnologia in grado di avere effetti antiaging. Gli effetti termici generati danno un immediato effetto tensore della pelle agendo sulla ossigenazione e stimolazione del collagene esistente ma anche effetti a lungo termine di stimolazione di nuove proteine strutturali da parte dei Fibroblasti.

**RF atermica** (RF Resistiva Bipolare pulsata)

Grazie a particolari emissioni elettromagnetiche, questa tipologia di RF, interagisce direttamente con la natura cellulare della pelle, ottenendo un riequilibrio del pH ma anche di molteplici umori tissutali, riportando la pelle al suo normale equilibrio. In questo trattamento il segnale della radiofrequenza è modulato per avere effetti direttamente su determinati canali ionici determinando una serie di reazioni volte all'effetto antiinfiammatorio e di aumento degli scambi intra/extracellulari.

**Stimolazione elettrica** (Elettropulsazione)

Particolari emissioni elettromagnetiche sono in grado di creare dei canali prioritari attraverso la pelle, riuscendo a far penetrare nella stessa determinate sostanze in grado di avere importanti effetti su tutta la sezione del tessuto. In base alla problematica si possono veicolare, antiossidanti, vitamine, proteine ecc.

## Manipolo 2

- Testina **A** (viso) dimensioni 35x25mm: Vacuum / Press

- Testina **B** (décolleté) dimensioni 52x38mm: Vacuum / Press

**Vacuum** (max 80Kp)

Stimolazione meccanica del derma attraverso l'utilizzo di fasi di vuoto pulsato, per indurre l'aumento del microcircolo il drenaggio ma anche tutta una serie di reazioni di riarrangiamento del tessuto sottocutaneo, rimodellando le fibrosità del derma. Il trattamento con vaccum effettua un massaggio delle strutture del derma migliorando la circolazione linfatica e uniformando la consistenza dei tessuti.

**Press** (max 150Kp)

La press invece è una tipologia di trattamento che prevede delle fasi ritmate di spinta, con aria, in grado di generare delle vibrazioni meccaniche sottocutanee. Queste vibrazioni interagendo con i recettori della pelle sono in grado di stimolare differenti effetti tra i quali tonificazione, aumento del microcircolo e quindi effetto antiossidante.

## Manipolo 3

**Elettromiostimolazione**

Tipologia di trattamento studiato per stimolare lo strato muscolare del viso.

Al Crono invecchiamento della pelle spesso si associa una perdita di vigoria dello strato muscolare sottostante, con conseguente perdita di tono del viso e formazione di pieghe, rughe e rilassamenti più evidenti. La pelle si ancora sullo strato muscolare e quindi una perdita di tono di quest'ultimo determinerà un aspetto cedevole e stanco, rendendo anche poco efficaci i trattamenti del viso finalizzati solamente al trattamento dell'epiderma.



### **Hand-piece 1**

- Head **A** dimensions 35x25 mm

Radiofrequency at emission points Matrix for face treatments

- Head **B** dimensions 52x38 mm

Radiofrequency at emission points Matrix for décolleté treatments

**Matrix RF** (Resistive RF, emission points Matrix)

The special geometry of the electrode and the type of emission manage to evoke a microneedling effect, very effective in deep level on the collagen and Fibroblasts structures, since for its physical specifications it is able to cross easily the epidermis and the surface structures of derma. In fact, thanks to the fractional signal and to the energy emission matrix, it is possible to concentrate the energy at deep levels of derma by thus evoking significant and immediate effects on skin restructuration, by also stimulating an important oxygenating and regenerating action.

- Head **C** dimensions 35x25 mm

IR Led + Hyperthermic RF/Athermal RF/Electrical stimulation

- Head **D** dimensions 35x25 mm

Red Led + Hyperthermic RF/Athermal RF/Electrical stimulation

- Head **E** dimensions 35x25 mm

Blue Led + Hyperthermic RF/Athermal RF/Electrical stimulation

- Head **F** dimensions 35x25 mm

Hyperthermic RF/Athermal RF/Electrical stimulation

**IR Photobiostimulation** (850nm)

Luminous emission able to penetrate deeply on tissues, used to generate a deep diathermic effect able to stimulate the cellular metabolism, by facilitating the cellular turn-over and also the metabolic reduction of the deep fat layer.

**RED Photobiostimulation** (616nm)

Specific luminous emission able to interact with cellular mechanisms by increasing all activities aimed at the improvement of the skin trophism, by promoting the photostimulation of particular mitochondrial proteins.

**BLUE Photobiostimulation** (470nm)

Specific electromagnetic emissions able to have a bactericidal action even against the organisms responsible of acne. In fact, the Blue/Violet light provokes a photosensitization reaction of the porphyrins by producing oxygen and therefore having an anti-bactericidal action.

**Hyperthermic RF** (Bipolar Resistive RF)

Innovative technology able to have anti-aging effects. The generated thermal effects give an immediate tension effect on the skin by acting on the oxygenation and stimulation of the existing collagen, but also long-term stimulation effects of the new structural proteins by the Fibroblasts.

**Athermal RF** (Pulsed Bipolar Resistive)

Thanks to special electromagnetic emissions, this type of RF interacts directly with the skin cellular nature, by obtaining a pH rebalance, and also many tissue humours, by bringing back skin to its normal balance. In this treatment the radiofrequency signal is modulated, so that to have effects directly on specific ionic channels, granting a series of reactions with anti-inflammatory effect and increase of intra/extracellular exchanges.

**Electrical Stimulation** (Electropulse)

Specific electromagnetic emissions able to create some priority channels through the skin, by allowing the penetration on it of specific substances able to have important effects on the whole tissue section. According to the problem, they can be conveyed antioxidants, vitamins, proteins etc.

### **Hand-piece 2**

- Head A dimensions 35x25 mm

- Head B dimensions 52x38 mm

**Vacuum** (max 80kPa)

Derma mechanical stimulation through the use of pulsed vacuum phases, to induce the increase of microcirculation, the drainage and also a series of reactions of subcutaneous tissue re-adjustment, by remodelling the derma fibrousness. The vacuum treatment makes a massage of derma structures by improving the lymphatic circulation and making uniform the tissue consistence.

**Press** (max 150 kPa)

Press is a type of treatment that provides for rhythmic push phases, with air, able to generate some subcutaneous mechanical vibrations. These vibrations, by interacting with the skin receptors, are able to stimulate different effects including toning, microcirculation increase and therefore anti-oxidant effect.

### **Hand-piece 3**

**Electromiostimulation**

Type of treatment studied to stimulate the face muscular layer. Often, together with chrono-ageing of the skin it is associated a loss of vigour of the underlying muscular layer, with consequent loss of face tone and formation of folds, wrinkles and more evident relaxations. The skin drapes on the muscular layer and therefore a loss of tone of this latter will lead to a tired and saggy aspect, also by making less effective the face treatments just finalized to epidermis treatment.





**Easy Power**  
Body & Face



**Le più evolute tecnologie per trattamenti viso, décolleté e corpo,  
in un unico apparecchio, in sinergia tra loro, per  
massimizzarne le performance!**

***The most advanced technologies for face, décolleté and body  
treatments in a single device, in synergy with each other to  
maximize the performance!***




Una parte dei trattamenti viene eseguita manualmente con un manipolo caratterizzato dalla possibilità di montare diversi tipi di testine, con caratteristiche geometriche e funzionalità diverse

*A part of the treatments is performed with a handpiece characterized by the possibility of mounting different types of heads, with different geometric characteristics and functions*

- CORPO - BODY**
- Elettrodi bipolari a **geometria variabile**: per definire con precisione la zona in cui concentrare l'energia erogata
  - Elettrodo multipolare **MATRIX**: emulazione microneedling per il trattamento degli inestetismi delle smagliature
  - Elettrodo **esapolare** corpo
- Bipolar electrodes with **variable geometry**: to precisely define the area in which to concentrate the delivered energy*
- **MATRIX** multipolar electrode: microneedling emulation for the treatment of stretch mark blemishes*
- **Hexapolar** body electrode*

- VISO - FACE**
- Elettrodo **bipolare rughe**
  - Elettrodo multipolare **MATRIX**: emulazione microneedling per il trattamento degli inestetismi del viso
  - Elettrodo **bipolare** viso
- **Wrinkles bipolar** electrode*
- **MATRIX** multipolar electrode: microneedling emulation for the treatment of face blemishes*
- **Bipolar** face electrode*

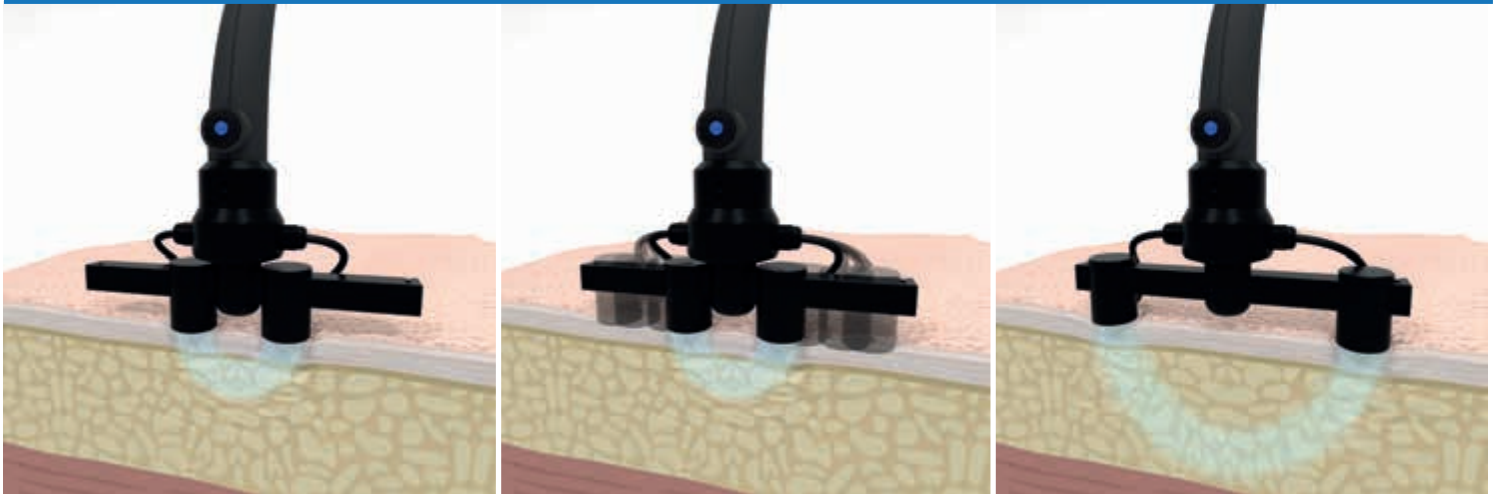

La testina a **geometria variabile** per trattamenti corpo consente, aumentando o riducendo la distanza tra gli elettrodi, di focalizzare l'energia erogata rispettivamente più in profondità o più superficialmente per lavorare esattamente dove si vuole concentrare l'azione del trattamento.

*The head with **variable geometry** for body treatments allows, by increasing or reducing the distance between the electrodes, to focus the energy delivered respectively deeper or more superficially to work exactly where you want to concentrate the treatment action.*

## Trattamenti viso e décolletè

### • Radiofrequenza ipertermica - Testina bipolare VISO + Testina bipolare RUGHE

La tecnica permette un immediato effetto "lifting" della pelle grazie alla riorganizzazione delle fibre connettivali; a questo effetto rapido seguirà uno più duraturo di neofibrillogenesi, con produzione permanente di nuovo connettivo. Ciò permette un rimodellamento delle forme, una ripresa del tono cutaneo, la riduzione delle pieghe da afflosciamento, una reidratazione complessiva.

### • Radiofrequenza pulsata- Resistiva bipolare

L'emissione della radiofrequenza avviene in modo pulsato, permettendo di lavorare anche superficialmente e in zone delicate o in parti sensibili.

### • Matrix RF – Radiofrequenza ipertermica resistiva a matrice di punti di emissione

La particolare emissione a "colonne" di energia viene sfruttata per lavorare soprattutto a livello epidermico, concentrando l'azione sugli inestetismi superficiali. Trovano giovamento dal trattamento le microrugosità, le macchie pigmentarie, le impurità della pelle, i pori dilatati, le cicatrici post acneiche.

### • Elettropulsazione

Agevola l'assorbimento di sostanze antiossidanti, schiarenti, antiacne, antiage, idratanti, sinergizzando l'azione dei vari tipi di radiofrequenza scelti.

## Face and décolleté treatments

### • Hyperthermic radiofrequency - Bipolar FACE head + bipolar WRINKLES head

*The technique allows an immediate "lifting" effect of the skin thanks to the reorganization of the connective fibers; this rapid effect will be followed by a more lasting one of neofibrillogenesis, with permanent production of new connective tissue. This allows a remodeling of the shapes, a recovery of the skin tone, the reduction of sagging folds, an overall rehydration.*

### • Pulsed radiofrequency - Bipolar resistive

*The radiofrequency emission occurs in a pulsed way, allowing you to work even superficially and in delicate areas or in sensitive parts.*

### • Matrix RF - Resistive hyperthermic radiofrequency with emission points matrix

*The particular "column" emission of energy is exploited to work especially at the epidermal level, concentrating the action on superficial imperfections. Micro-roughness, pigment spots, skin impurities, dilated pores, post-acne scars benefit from the treatment.*

### • Electropulsation

*It helps the absorption of antioxidant, lightening, anti-acne, anti-aging, moisturizing substances, synergizing the action of the various types of radiofrequency chosen.*

## Trattamenti corpo

### • Radiofrequenza ipertermica – Resistiva esapolare

Il manipolo esapolare permette di ampliare ed intensificare il campo d'azione per le zone del corpo. L'innalzamento della temperatura dermica viene sfruttata nell'eccesso di adiposità cutanea e nella cellulite\* con aumento del pannicolo adiposo. Permangono gli effetti rassodanti, grazie alla neofibrillogenesi collagene ed elastica, per cui è indicata l'applicazione su zone afflosciate ed ipotoniche e su cellulite\* con perdita di tono. Il miglioramento del microcircolo e l'azione ossigenante, detossificante e drenante hanno ottime indicazioni nella cellulite\* con stasi, edema e ritenzione idrica.

### • Radiofrequenza pulsata- Resistiva esapolare

Il manipolo esapolare lavora in questo caso più superficialmente ed è preferito per il trattamento della c.d. cellulite\* ai primi stadi o in presenza di ritenzione idrica e buccia d'arancia. Anche le smagliature con epidermide che ha perso turgidità sono una indicazione elettiva.

### • Matrix RF – Radiofrequenza ipertermica resistiva a matrice di punti di emissione

La particolare emissione a "colonne" di energia viene sfruttata per lavorare soprattutto a livello epidermico, concentrando l'azione sugli inestetismi superficiali. Trovano fondamentale giovamento dal trattamento gli inestetismi delle smagliature, le macchie pigmentarie e le impurità della pelle.

### • Elettropulsazione

Soprattutto nel corpo, dove lo spessore della pelle e la profondità dell'adipe rendono difficili gli interventi estetici, è importante associare l'effetto di principi attivi mirati che sinergizzano l'azione delle altre energie fisiche. Sono indicati cosmetici drenanti, rassodanti, lipolitici, anticellulite, ecc.

## Body treatments

### • Hyperthermic radiofrequency - Resistive hexapolar

*The hexapolar handpiece allows to broaden and intensify the field of action for the areas of the body. The rise in dermal temperature is exploited in excess skin adiposity and in cellulite\* with an increase in the adipose panniculus. The firming effects remain, thanks to the collagen and elastic neofibrillogenesis, for which application on sagging and hypotonic areas and on cellulite\* with loss of tone is indicated. The improvement of microcirculation and the oxygenating,*

*detoxifying and draining action have excellent indications in cellulite\* with stasis, edema and water retention.*

### • Pulsed radiofrequency - Resistive hexapolar

*In this case, the hexapolar handpiece works more superficially and is preferred for the treatment of the so-called cellulite\* in the early stages or in the presence of water retention and orange peel. Stretch marks with skin that has lost firmness are also an elective indication.*

### • Matrix RF - Hyperthermal resistive emission dot matrix radio frequency

*The particular "column" emission of energy is used to work especially at the epidermal level, concentrating the action on superficial blemishes. The blemishes of stretch marks, pigmentation spots and skin impurities find fundamental benefit from the treatment.*

### • Electropulsation

*Especially in the body, where the thickness of the skin and the depth of the fat make aesthetic interventions difficult, it is important to combine the effect of targeted active ingredients that synergize the action of other physical energies. raining, firming, lipolytic, anti-cellulite\* cosmetics, etc. are indicated.*



**Easy Power**  
Body & Face

## **DEMS – Diffuse Electro Myo Stimulation**

Metodica che sfrutta impulsi elettrici di varia frequenza, intensità e durata per ottenere una contrazione mirata su determinati fasci muscolari ma diffusa anche su tutti i fasci muscolari minori, volontari ed involontari presenti nella zona trattata. Per ottenere un movimento muscolare corretto e gradevole per il soggetto trattato, la forma d'onda è bifasica compensata. **La**



**DEMS viene applicata alla muscolatura con un innovativo sistema a fasce elettroconduttive che consentono un ideale diffusione della stimolazione nella zona trattata e permettono di concentrare il trattamento su eventuali zone con maggior necessità.**

Diffonde la stimolazione su più fasci muscolari e rende l'attività fisica generata maggiormente fisiologica. Con la tecnologia DEMS, variando frequenza, durata dell'impulso e della pausa il trattamento viene mirato maggiormente ad attività di tipo aerobico e quindi snellente, piuttosto che anaerobico, quindi tonificante, piuttosto che microcircolatoria.

Questa tecnica permette di effettuare una contrazione senza affaticamento (quindi per persone meno giovani) e di far lavorare sia fibre volontarie che involontarie.

Una fase DEMS effettuata dopo ad una fase di HEM Radio waves beneficia del riscaldamento endogeno generato nella zona e consente di utilizzare stimolazioni elettriche di alta intensità senza discomfort.

## **DEMS – Diffuse Electro Myo Stimulation**

*Method that uses electrical impulses of various frequency, intensity and duration to obtain a targeted contraction on certain muscle bundles, but also widespread on all minor, voluntary and involuntary muscle bundles present in the treated area. To obtain a correct and pleasant muscle movement for the treated subject, the waveform is biphasic compensated.*

**DEMS is applied to the muscles with an innovative system of electrically conductive bands which allow an ideal diffusion of stimulation in the treated area and allow the treatment to be concentrated on any areas with greater need.** *It spread the stimulation over multiple muscle bundles and make the physical activity generated more physiological. By varying the frequency, last of the pulse and the pause, the treatment is aimed more at aerobic and therefore slimming rather than anaerobic and therefore toning rather than microcirculatory activities.*

*This technique allows you to perform a contraction without tiring (therefore for all ages) and make work both voluntary and involuntary fibers.*

*A DEMS phase carried out after a HEM Radio wave phase benefits from the endogenous heating generated in the area and allows to use high intensity electrical stimulation without discomfort.*



## DES – Draining Electro Stimulation

Tecnologia mirata essenzialmente al **drenaggio venoso e linfatico, estremamente indicata negli inestetismi dovuti ad un eccesso di ristagno dei liquidi localizzati**. Sfrutta gli impulsi elettrici per effettuare un massaggio peristaltico attraverso l'attivazione sequenziale dei canali stimolanti, che creano un significativo aumento della migrazione linfatica verso gli scarichi linfatici.



Trattamento essenziale anche per drenare il corpo dopo fasi mirate allo snellimento, alla tonificazione ed al trattamento multifattoriale della cellulite\*.

**Viene applicato con un innovativo sistema a fasce elettroconduttive imbibite.**

Il trattamento è composto di due fasi:

- Fase A: caratterizzata da stimolazione elettromagnetica in grado di aumentare la circolazione periferica, fase di capillarizzazione.
- Fase B: caratterizzata da un massaggio peristaltico effettuato attraverso l'attivazione sequenziale dei canali stimolanti.

### *DES – Draining Electro Stimulation*

*Technology essentially aimed at **venous and lymphatic drainage, extremely suitable for blemishes due to excessive stagnation of localized liquids**. It takes advantage of the electrical impulses to perform a peristaltic massage through the sequential activation of the stimulating channels, which create a significant increase in lymphatic migration towards the lymphatic drains.*

*Essential treatment also to drain the body after phases aimed at slimming, toning and multifactorial treatment of cellulite\*.*

***It is applied with an innovative system of soaked electroconductive bands.***

*The treatment consists of two phases:*

- *Phase A: characterized by electromagnetic stimulation capable of increasing peripheral circulation capillarization phase.*
- *Phase B: characterized by a peristaltic massage performed through the sequential activation of the stimulating channels.*



# **BTS** beauty total solution



Apparecchiatura Hi-tech basata su tecnologie di ultima generazione per trattare gli inestetismi di: viso, décolleté e corpo.

Dotata di tre manipoli viso e corpo che possono agire in sinergia erogando differenti energie attive e di una sezione di elettromiostimolazione per il corpo.

In base alla zona che si vuole trattare, vengono selezionate modalità, durata, intensità e tipologia di intervento, per lavorare in modo mirato e ottenere un incremento sinergico degli effetti.

*Hi-tech equipment based on latest generation technologies to treat the imperfections of: face, décolleté and body. Equipped with three face and body handpieces that can act in synergy by delivering different active energies and an electromyostimulation section for the body.*

*According to the area to be treated, modalities, duration, intensity and type of intervention are selected, to work in a targeted way and obtain a synergistic increase in the effects.*



## Trattamenti viso e décolletè

### • Radiofrequenza ipertermica -Resistiva bipolare

La tecnica permette un immediato effetto “lifting” della pelle grazie alla riorganizzazione delle fibre connettivali; a questo effetto rapido seguirà uno più duraturo di neofibrillogenesi, con produzione permanente di nuovo connettivo. Ciò permette un rimodellamento delle forme, una ripresa del tono cutaneo, la riduzione delle pieghe da afflosciamento, una reidratazione complessiva.

### • Radiofrequenza pulsata- Resistiva bipolare

L'emissione della radiofrequenza avviene in modo pulsato, permettendo di lavorare anche superficialmente e in zone delicate o in parti sensibili.

### • Matrix RF – Radiofrequenza ipertermica resistiva a matrice di punti di emissione

La particolare emissione a “colonne” di energia viene sfruttata per lavorare soprattutto a livello epidermico, concentrando l'azione sugli inestetismi superficiali. Trovano giovamento dal trattamento le microrugosità, le macchie pigmentarie, le impurità della pelle, i pori dilatati, le cicatrici post acneiche.

### • Elettropulsazione

Agevola l'assorbimento di sostanze antiossidanti, schiarenti, antiacne, antiage, idratanti, sinergizzando l'azione dei vari tipi di radiofrequenza scelti.

## Trattamenti corpo

### • Radiofrequenza ipertermica – Resistiva esapolare

Il manipolo esapolare permette di ampliare ed intensificare il campo d'azione per le zone del corpo. L'innalzamento della temperatura dermica viene sfruttata nell'eccesso di adiposità cutanea e nella cellulite\* con aumento del pannicolo adiposo. Permangono gli effetti rassodanti, grazie alla neofibrillogenesi collagene ed elastica, per cui è indicata l'applicazione su zone afflosciate ed ipotoniche e su cellulite\* con perdita di tono. Il miglioramento del microcircolo e l'azione ossigenante, detossificante e drenante hanno ottime indicazioni nella cellulite\* con stasi, edema e ritenzione idrica.

### • Radiofrequenza pulsata- Resistiva esapolare

Il manipolo esapolare lavora in questo caso più superficialmente ed è preferito per il trattamento della c.d. cellulite\* ai primi stadi o in presenza di ritenzione idrica e buccia d'arancia. Anche le smagliature con epidermide che ha perso turgidità sono una indicazione elettiva.

### • Elettropulsazione

Soprattutto nel corpo, dove lo spessore della pelle e la profondità dell'adipe rendono difficili gli interventi estetici, è importante associare l'effetto di principi attivi mirati che sinergizzano l'azione delle altre energie fisiche. Sono indicati cosmetici drenanti, rassodanti, lipolitici, anticellulite, ecc.

### • Elettromiostimolazione

E' dotata di 8 coppie di elettrodi con intensità regolabile a coppia, in modo tale da permettere una ottimale copertura dei fasci muscolari più importanti o di localizzare, con gli appositi elettrodi, il lavoro su specifiche zone del corpo.

I programmi residenti svolgono diverse attività programmabili: lavoro aerobico per snellire, lavoro anaerobico per potenziare e rassodare, stimolo alla neovascolarizzazione per ossigenare, effetto decontratturante e rilassante.

Nel loro svolgimento prevedono una prima fase preparatoria di RF di riscaldamento e rilassamento, a cui segue la vera e propria elettromiostimolazione che riproduce la corretta fisiologia dell'allenamento estetico: riscaldamento-lavoro-defaticamento.

Questa sezione è operatore indipendente e può lavorare a sé per tutte le situazioni di perdita di tono muscolare e cutaneo, nel rassodamento, nella c.d. cellulite\* con avvallamenti e afflosciamenti, nel modellamento ipertrofico di zone ben definite ma è ideale in associazione con i manipoli di radiofrequenza e di elettropulsazione per il suo effetto boost e sinergico.





### **Face and décolleté treatments**

#### **• Hyperthermic radiofrequency - Bipolar resistant**

The technique allows an immediate "lifting" effect of the skin thanks to the reorganization of the connective fibers; this rapid effect will be followed by a more lasting one of neofibrillogenesis, with permanent production of new connective tissue. This allows a remodeling of the shapes, a recovery of the skin tone, the reduction of sagging folds, an overall rehydration.

#### **• Pulsed radiofrequency - Bipolar resistive**

The radiofrequency emission occurs in a pulsed way, allowing you to work even superficially and in delicate areas or in sensitive parts.

#### **• Matrix RF - Resistive hyperthermic radiofrequency with emission points matrix**

The particular "column" emission of energy is exploited to work especially at the epidermal level, concentrating the action on superficial imperfections. Micro-roughness, pigment spots, skin impurities, dilated pores, post-acne scars benefit from the treatment.

#### **• Electropulsation**

It helps the absorption of antioxidant, lightening, anti-acne, anti-aging, moisturizing substances, synergizing the action of the various types of radiofrequency chosen.

### **Body treatments**

#### **• Hyperthermic radiofrequency - Resistive hexapolar**

The hexapolar handpiece allows to broaden and intensify the field of action for the areas of the body. The rise in dermal temperature is exploited in excess skin adiposity and in cellulite\* with an increase in the adipose panniculus. The firming effects remain, thanks to the collagen and elastic neofibrillogenesis, for which application on sagging and hypotonic areas and on cellulite\* with loss of tone is indicated. The improvement of microcirculation and the oxygenating, detoxifying and draining action have excellent indications in cellulite\* with stasis, edema and water retention.

#### **• Pulsed radiofrequency - Resistive hexapolar**

In this case, the hexapolar handpiece works more superficially and is preferred for the treatment of the so-called cellulite\* in the early stages or in the presence of water retention and orange peel. Stretch marks with skin that has lost firmness are also an elective indication.

#### **• Electropulsation**

Especially in the body, where the thickness of the skin and the depth of the fat make aesthetic interventions difficult, it is important to combine the effect of targeted active ingredients that synergize the action of other physical energies.

Draining, firming, lipolytic, anti-cellulite\* cosmetics, etc. are indicated.

#### **• Electromyostimulation**

It is equipped with 8 pair of electrodes with adjustable intensity, in such a way as to allow optimal coverage of the most important muscle groups or to localize, with the appropriate electrodes, the work on specific areas of the body.

The resident programs carry out various programmable activities: aerobic work to slim down, anaerobic work to strengthen and firm up, stimulation of neovascularization to oxygenate, decontracting and relaxing effect.

In their development, they provide a first preparatory phase of RF of heating and relaxation, followed by real electromyostimulation that mimics the correct physiology of aesthetic training: warm-up-work-cool-down.

This section is an independent operator and can work independently for all situations of loss of muscle and skin tone, in firming, in the so-called cellulite\* with hollows and sagging, in the hypertrophic modeling of well-defined areas but it is ideal in association with radiofrequency and electropulsation handpieces for its boost and synergistic effect.



# P E R F E C T A<sup>®</sup> T O T A L B O D Y

**PERFECTA TOTAL BODY** é un'apparecchiatura per il drenaggio e il presso-massaggio a tutto corpo, suddiviso in tre sezioni, testa e viso, arti superiori ed arti inferiori. Una sofisticata centralina elettronica di controllo, gestita da un microprocessore, vi permette di sfruttare tutte le funzioni di PERFECTA TOTAL BODY in modo facile e intuitivo.

**PERFECTA TOTAL BODY** is a unit for total body drainage and presso-massage: it is designed for three different sections, the head and face, the upper limbs and the lower limbs.

*A sophisticated yet user friendly electronic unit, controlled by a microprocessor, manages all the PERFECTA TOTAL BODY functions.*



## **LE 3 SEZIONI DI PERFECTA TOTAL BODY, utilizzabili singolarmente**

### **A - Sezione testa-viso**

Caschetto con poggiatesta integrato per il trattamento sequenziale del viso (mento, guance, fronte, collo e nuca. Nuca e collo con sistema Sea Wave). Il poggiatesta attrezzato dispone di 6 uscite per altrettanti settori del casco e di un sistema di innesto immediato alla macchina (RAPID-AIR).

### **B - Sezione arti superiori**

n°2 bracciali con 7 settori sistema Sea Wave per il trattamento sequenziale degli arti superiori e palmare integrato per l'appoggio della mano affinché la pressione si eserciti esclusivamente sul palmo e sul dorso evitando la compressione laterale.

La particolare anatomia del bracciale, regolabile a velcro, integrato dal palmare, consente di trattare l'arto senza soluzione di continuità, dalla mano alla parte superiore della spalla.

La sezione è collegata alla macchina con un sistema ad innesto immediato capace di riconoscere la sezione di corsetteria alla quale è dedicato (RAPID AIR).

## C - Sezione arti inferiori, fianchi, inguine

n°2 gambali, n°2 cosciali, n°2 pressori inguinali, n°1 corsetto per trattare fianchi e glutei. Ogni gambale è composto di 4 settori *Sea Wave* e di un plantare costituito da una soletta di materiale automodellante, una soletta rigida sagomata e da una camera d'aria, concepiti in modo da applicare la pressione sempre sotto la pianta del piede e mai lateralmente.

Dalla pianta del piede, e per tutto l'arto, la pressione viene applicata senza soluzione di continuità.


Il cosciale consente di regolare l'estensione del gambale ed adeguarlo alle diverse lunghezze degli arti. Il pressore inguinale, anatomicamente realizzato, consente un perfetto drenaggio linfatico della zona inguinale.

Il corsetto per fianchi e glutei è unificato e si compone di 2 settori sistema *Sea Wave*.

La regolazione della corsetteria, realizzata a velcro, consente l'estensione a parti anatomiche di dimensioni estremamente diverse.

La sezione collegata alla macchina con un sistema ad innesto immediato capace di riconoscere la sezione di corsetteria alla quale è dedicato (RAPID AIR).

**Sea Wave** è il sistema di segmenti autosormontanti che, gonfiandosi sequenzialmente e ciascuno prima che il precedente sia completamente svuotato, consente una pressione selettiva e progressiva senza soluzione alcuna di continuità.

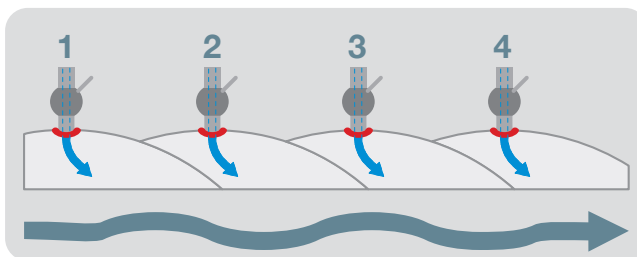

**Sea Wave** is a system made up of overlapping segments: each of these is sequentially inflated before the previous one is totally deflated. This enables a selective and progressive pressure without interruptions.

## THE 3 WORKING SECTION OF PERFECTA TOTAL BODY, usable individually

### A - Head-face section

Helmet with a built-in headrest for sequential treatment of the face (chin, cheeks, forehead, front and back of neck. Front and back of neck with *Sea Wave* System).

The headrest has 6 outlets for a correspondent number of sectors in the helmet, as well as a system for immediate connection to the machine (RAPID-AIR).

### B - Upper limbs section

2 arm-pieces with 7 *Sea Wave* sectors for the sequential treatment of upper limbs and an integrated palm-piece for the hand in order to exercise pressure solely on the palm and on the back of hand with no crushing at the sides.

The particular anatomy of the arm-piece, which is adjustable through a velcro fastening, additionally to the palm piece, allows you to treat the limb uninterruptedly from the hand to the upper shoulder. This section connects to the machine with a quick coupling system, capable of recognising the corset element which it is dedicated to (RAPID AIR).

### C - Section for lower limbs, hips, groin

2 leg-pieces, 2 thigh-pieces, 2 groin compressors, 1 corset element for treating hips and buttocks. Each leg-piece consists of 4 *Sea Wave* sectors and of an arch support made by a sole of self-moulding material, a rigid shaped sole and an air bladder, designed for exercising pressure under the sole of the foot and never at its sides.

The pressure is applied from the sole of the foot all along the limb with no interruption.

The thigh-piece makes it possible to adjust the extension of the leg-piece and to adapt it to the different heights of the limbs. The anatomically designed groin compressor allows a perfect lymphatic drainage of the groin area.

The corset for hips and buttocks is made of one piece only and consists of 2 *Sea Wave* sectors.

The adjustment of the corset elements through a velcro fastening allows you to extend them to very different sized anatomical parts.

This section connects to the machine with a quick coupling system, capable of recognising the corset element which it is dedicated to (RAPID AIR).

# P E R F E C T A Sea Wave




**PERFECTA SEA WAVE** é un'apparecchiatura per il drenaggio e il presso-massaggio degli arti inferiori.

Una sofisticata centralina elettronica di controllo, gestita da un microprocessore, vi permette di sfruttare tutte le funzioni di **PERFECTA SEA WAVE** in modo facile e intuitivo. 10 programmi preimpostati; modificabili in ogni parametro.

***PERFECTA TOTAL BODY** is a unit for lower limbs drainage and presso-massage.*

*A sophisticated yet user friendly electronic unit, controlled by a microprocessor, manages all the **PERFECTA SEA WAVE** functions. 10 preset programs; adjustable in every parameter.*

**Sea Wave** è il sistema di segmenti autosormontanti che, gonfiandosi sequenzialmente e ciascuno prima che il precedente sia completamente svuotato, consente una pressione selettiva e progressiva senza soluzione alcuna di continuità.

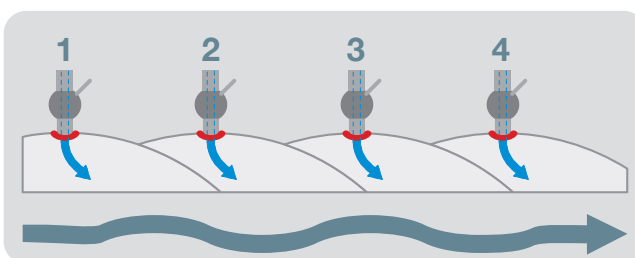

**Sea Wave** is a system made up of overlapping segments: each of these is sequentially inflated before the previous one is totally deflated. This enables a selective and progressive pressure without interruptions.

## Arti inferiori, fianchi e inguine.

n°2 gambali, n°2 cosciali, n°2 pressori inguinali, n°1 corsetto per trattare fianchi e glutei. Ogni gambale è composto di 4 settori Sea Wave e di un plantare costituito da una soletta di materiale automodellante, una soletta rigida sagomata e da una camera d'aria, concepiti in modo da applicare la pressione sempre sotto la pianta del piede e mai lateralmente.

Dalla pianta del piede, e per tutto l'arto, la pressione viene applicata senza soluzione di continuità.

Il cosciale consente di regolare l'estensione del gambale ed adeguarlo alle diverse lunghezze degli arti. Il pressore inguinale, anatomicamente realizzato, consente un perfetto drenaggio linfatico della zona inguinale.

Il corsetto per fianchi e glutei è unificato e si compone di 2 settori sistema Sea Wave.

La regolazione della corsetteria, realizzata a velcro, consente l'estensione a parti anatomiche di dimensioni estremamente diverse.



### **Lower limbs, hips, groin.**

*2 leg-pieces, 2 thigh-pieces, 2 groin compressors, 1 corset element for treating hips and buttocks. Each leg-piece consists of 4 Sea Wave sectors and of an arch support made by a sole of self-moulding material, a rigid shaped sole and an air bladder, designed for exercising pressure under the sole of the foot and never at its sides.*

*The pressure is applied from the sole of the foot all along the limb with no interruption. The thigh-piece makes it possible to adjust the extension of the leg-piece and to adapt it to the different heights of the limbs. The anatomically designed groin compressor allows a perfect lymphatic drainage of the groin area.*

*The corset for hips and buttocks is made of one piece only and consists of 2 Sea Wave sectors. The adjustment of the corset elements through a velcro fastening allows you to extend them to very different sized anatomical parts.*



THAO MAS



THAO MA



THAO FI

## **Arredo funzionale per l'estetica e il benessere**

La capacità di creare ambiente è compito essenziale di ogni componente.

Sia nell'arredare una cabina d'estetica che una zona relax o un centro benessere. THAO offre molteplici soluzioni finalizzate di elevato contenuto tecnico e di grande valore e accuratezza nei materiali impiegati.

Il design originale e dedicato si integra strettamente alla funzione dei vari elementi ed all'ambiente in cui essi si collocano.

### ***Functional furnishings for beauty and well-being.***

*The ability to create an environment is the essential task of every component.*

*Whether furnishing a beauty treatment booth or a relaxation area or well-being centre. THAO offers numerous targeted solutions with high technological content and great attention to value and craftsmanship as regards the materials used. The original and dedicated design is closely integrated with the functions of the various elements and with the environment in which these are located.*



Il concetto di benessere entra ogni giorno di più nelle abitudini di tutti noi.

Ogni centro estetico e di benessere sta dimostrando il proprio impegno nell' offrire servizi migliori in competenza e professionalità, adottando strumenti di grande qualità, gradevolezza ed il cui valore sia immediatamente percepito dalla clientela.

THAO MASSAGE comprende l'arredo funzionale di una cabina estetica: lettino, carrello, sgabello, cromo a parete, specchio a parete.

**CALDO – PREZIOSO – RAFFINATO – INVITANTE**

*The concept of well-being is becoming increasingly more important for each and every one of us.*

*Every beauty and well-being centre is showing its commitment by offering better services in terms of skill and professional capacities, adopting top-quality and comfortable instruments, the value of which is immediately perceived by clients.*

*THAO MASSAGE comprises the functional furnishings of a beauty treatment booth: couch, trolley, stool, wall-mounted chromotherapy lights, wall mirror.*

**WARM – PRECIOUS – REFINED – INVITING**

**THAO MAS.** E' il LETTINO più tecnico della linea MASSAGE.

La sua originale struttura consente con pochi semplici movimenti di variare a piacere l'inclinazione di tutti i piani imbottiti, per adattarsi ad ogni possibile trattamento. Foro facciale.

Piano inferiore d'appoggio. LxPxA cm 207x66x80

**THAO MAS.** *This is the most technical couch of the MASSAGE line.*

*Thanks to its original structure, the angle of all the padded surfaces can be changed at will with just a few simple movements, to adapt to all possible treatments. Face hole.*

*Lower support surface. WxDxH cm 207x66x80*



**THAO C.** Cromo da parete. Struttura in legno pregiato finemente lavorato.

Design minimalista per adattarsi ad ogni ambiente. L'alternanza delle luci, l'evanescenza, l'esplosione dei colori contribuiscono al benessere ad alla gioia di chi ne vive lo spazio.

230 Vac – A. 2,1 max. Gestione automatica computerizzata. LxPxA cm 144x16x65

**THAO C.** *Wall-mounted chromotherapy lights. Finely-crafted prized wood structure.*

*Minimalist design to better adapt to any environment. The alternation of the lights, the evanescence, the explosion of colours contribute to well being and to the joie-de-vivre of those involved. 230 V AC – A. 2.1 max. Automatic computerised control WxDxH cm 144x16x65*

**THAO KA.** Carrello in cristallo, acciaio e legno pregiato finemente lavorato.

Ruote pivotanti con freno. LxPxA cm 84x45x92

**THAO KA.** *Trolley in glass, steel and finely crafted prized wood. Castors with brake.*

*WxDxH cm 84x45x92*

**THAO I.** Specchiera a parete sagomata. Amplifica lo spazio. Completa ed arricchisce l'ambiente.

LxPxA cm 100x3,5x60

**THAO I.** *Shaped wall mirror unit. Extends space. Completes and enhances the environment.*

*WxDxH cm 100x3,5x60*

**THAO SI.** Pratico e robusto sgabello in acciaio e legno pregiato finemente lavorato.

LxPxA cm 40x40x49

**THAO SI.** *Practical and sturdy stool in steel and finely crafted prized wood.*

*WxDxH cm 40x40x49*



THIAO®  
OTIUM

Design raffinato, funzionalità, materiali di grande qualità, legnami preziosi e resistenti ad umidità e calore lavorati con estrema cura; imbottiture robuste e rivestimenti di grande pregio. Apparato ad infrarossi motorizzato, opportunamente posizionabile per il riscaldamento profondo delle zone trattate. 6 lampade IR ad accensione indipendente, timer 20'/60', sonda di temperatura, pulsante rosso di sicurezza.

*Sophisticated styling, convenience, choice quality materials, finely crafted exquisite woods resistant to moisture and heat; tough padding and prestige upholstery. Motor-operated infrared device, positioned as required for in-depth heating of the treated zones. 6 IR lamps with independent on-off control, 20'/60' timer, temperature sensor, red safety button.*



Materassino morbido, confortevole, lavabile, di colore brillante; coprimaterassino trasparente, lavabile, monocliente.

*Brightly coloured, soft, comfortable, washable mattress; see-through, washable, single-client cover.*



## Caratteristiche tecniche generali / General technical specifications

### SLIM UP® ULTRA

Tensione di alimentazione:	230 V~	<i>Input voltage:</i>	230 V~
Frequenza di rete:	50/60 Hz	<i>Main frequency:</i>	50/60 Hz
Potenza assorbita:	900 W	<i>Power consumption:</i>	900 W
Potenza disponibile alle lampade:	600 W (n.6 lampade, 100 W cad.)	<i>Available power for lamps:</i>	600 W (for 6 lamps, 100 W each)
Apparecchio di classe I	Parti applicate di tipo BF	<i>Electrical safety Class I</i>	<i>Applied accessories type BF</i>
Apparecchio per funzionamento continuo		<i>Continuous operating device</i>	
Sezionamento e protezione con interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità		<i>Sectioning and cutout by switch high-sensitivity residual current circuit breaker</i>	

### SLIM UP® STEAM

Tensione di alimentazione:	230 V~	<i>Input voltage:</i>	230 V~
Frequenza di rete:	50/60 Hz	<i>Main frequency:</i>	50/60 Hz
Potenza assorbita:	3000 W	<i>Power consumption:</i>	3000 W
Potenza disponibile alle lampade:	900 W (n.9 lampade, 100 W cad.)	<i>Available power for lamps:</i>	900 W (for 9 lamps, 100 W each)
Potenza disponibile per vapore:	2000 W	<i>Power of steam generator:</i>	2000 W
Apparecchio di classe I	Apparecchio per funzionamento continuo	<i>Electrical safety Class I</i>	<i>Continuous operating device</i>
Sezionamento e protezione con interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità		<i>Sectioning and cutout by switch high-sensitivity residual current circuit breaker</i>	

### SLIM UP® Face

Tensione di alimentazione:	230 V~	<i>Input voltage:</i>	230 V~
Frequenza di rete:	50/60 Hz	<i>Main frequency:</i>	50/60 Hz
Potenza assorbita:	200 W	<i>Power consumption:</i>	200 W
Apparecchio di classe I		<i>Electrical safety Class I</i>	
Parti applicate di tipo BF		<i>Applied accessories type BF</i>	
Apparecchio per funzionamento continuo		<i>Continuous operating device</i>	

### OPTOS® Easy Power

Tensione di alimentazione:	100-240 V~	<i>Input voltage:</i>	100-240 V~
Frequenza di rete:	50/60 Hz	<i>Main frequency:</i>	50/60 Hz
Potenza assorbita:	150 W	<i>Power consumption:</i>	150 W
Apparecchio di classe I		<i>Electrical safety Class I</i>	
Parti applicate di tipo BF		<i>Applied accessories type BF</i>	
Apparecchio per funzionamento continuo		<i>Continuous operating device</i>	

# BTS Beauty Total Solution

Tensione di alimentazione: 100-240 V~  
 Frequenza di rete: 50/60 Hz  
 Potenza assorbita: 100 W  
 Apparecchio di classe I  
 Parti applicate di tipo BF  
 Apparecchio per funzionamento continuo

*Input voltage: 100-240 V~*  
*Main frequency: 50/60 Hz*  
*Power consumption: 100 W*  
*Electrical safety Class I*  
*Applied accessories type BF*  
*Continuous operating device*

P E R F E C T A<sup>®</sup>  
 T O T A L B O D Y

P E R F E C T A  
 Sea Wave

Tensione di alimentazione: 230 V~  
 Frequenza di rete: 50/60 Hz  
 Potenza assorbita: 400 W  
 Apparecchio di classe I  
 Parti applicate di tipo BF  
 Apparecchio per funzionamento continuo

*Input voltage: 230 V~*  
*Main frequency: 50/60 Hz*  
*Power consumption: 400 W*  
*Electrical safety Class I*  
*Applied accessories type BF*  
*Continuous operating device*



THAO MAS: LxPxA 207x66x80 / WxDxH 207x66x80

THAO MA: LxPxA 205x66x80 / WxDxH 205x66x80

THAO FI: LxPxA 205x75x80 / WxDxH 205x75x80

THAO C: LxPxA 144x16x65 / WxDxH 144x16x65

Tensione di alimentazione: 230 V~  
 Frequenza di rete: 50/60 Hz  
 Potenza assorbita: 2,1 A Max

*Input voltage: 230 V~*  
*Main frequency: 50/60 Hz*  
*Power consumption: 2,1 A Max*

THAO KA: LxPxA 84x45x92 / WxDxH 84x45x92

THAO SI: LxPxA 40x40x49 / WxDxH 40x40x49

THAO I: LxPxA 100x3,5x60 / WxDxH 100x3,5x60

THAO OTIUM: LxPxA 210x80x158 / WxDxH 210x80x158

Tensione di alimentazione: 230 V~  
 Frequenza di rete: 50/60 Hz  
 Potenza assorbita: 700 Watt

*Input voltage: 230 V~*  
*Main frequency: 50/60 Hz*  
*Power consumption: 700 Watt*

Armadietti  
Lockers



Bagno Turco  
Steam bath



Panca  
Bench



Sgabello  
Stool



[ ClubWell® ]



Elemento multifunzioni  
Multifunctional element



Portateli, specchiera  
Towel holder, mirror

Lettino relax  
Relaxation bed



Sauna  
Sauna


# relax for active people





# [ClubWell®]

relax for active people

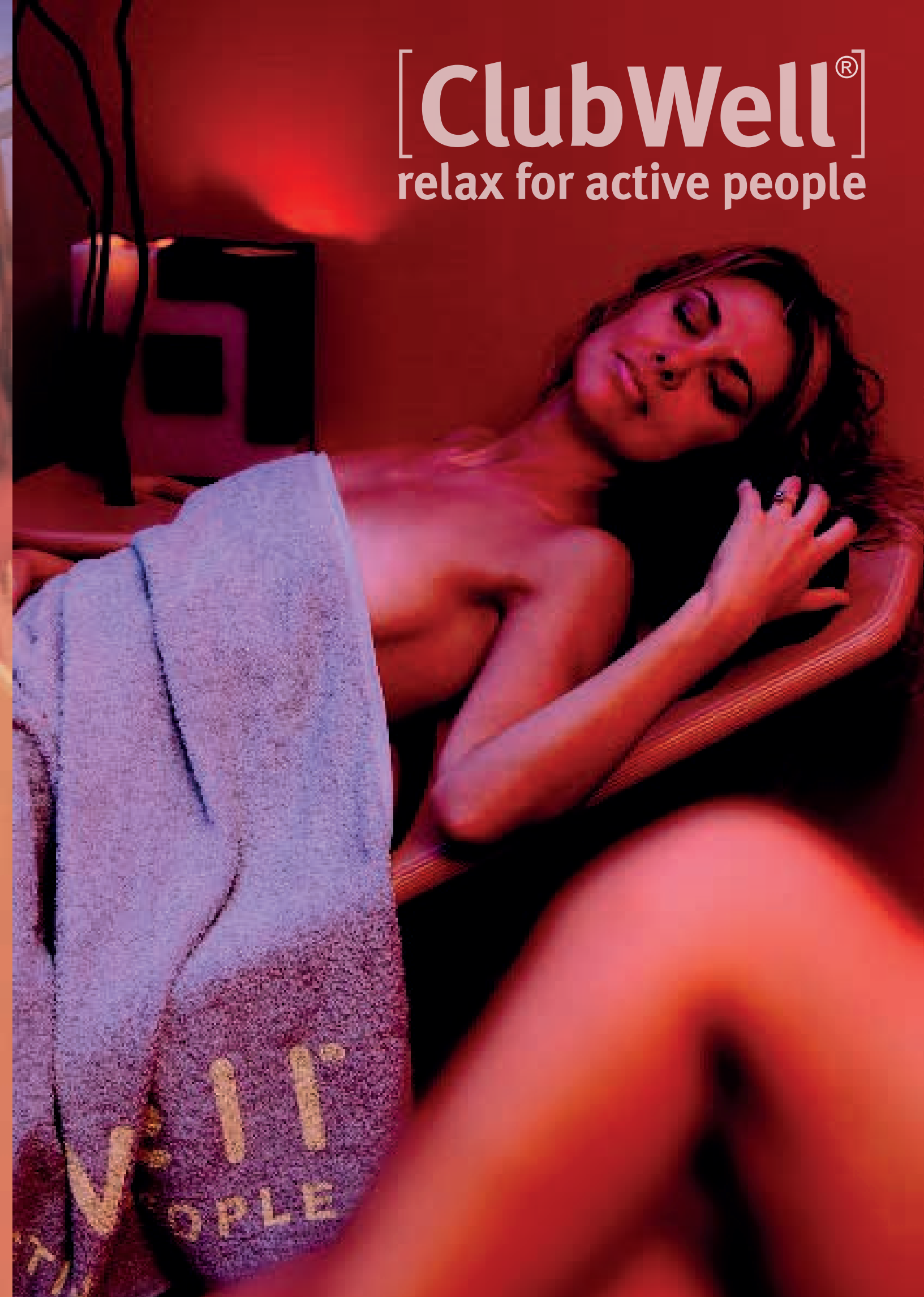



**DAM S.r.l.**

Via del Lavoro, 6 - Zona Industriale Montaletto

48015 CERVIA (RA) - ITALIA

Tel. +39 0544 965164 - Fax +39 0544 965159

E-mail: [info@saunaitalia.com](mailto:info@saunaitalia.com)

[www.saunaitalia.com](http://www.saunaitalia.com)

DAM S.r.l. E' Azienda certificata dall'ente accreditato TÜV Rheinland Italia S.r.l.

per il Sistema di Qualità secondo le norme: UNI EN ISO 9001:2015 - UNI CEI EN ISO 13485:2016

*This company has a Quality System certified according to UNI EN ISO 9001:2015 - UNI CEI EN ISO 13485:2016 standards by the TÜV Rheinland Italia S.r.l. accreditation body*

---

SAUNA ITALIA® si riserva la facoltà di modificare ogni prodotto senza preavviso.  
SAUNA ITALIA® keeps the authority to modify each product without advanced notice.

---