



OZON-SAUERSTOFF- THERAPIE.

OZONE-OXYGEN-THERAPY.

Einziger Hersteller von hyperbaren Geräten. Medizinisch zertifiziert.
The only manufacturer of hyperbaric devices. Medically certified.

HAB[®] HERRMANN SETZT SEIT 1984 NEUE STANDARDS IN DER OZON-SAUERSTOFF-THERAPIE.

**Einzigiger Hersteller von hyperbaren Geräten.
Medizinisch zertifiziert.**

WAS IST MEDIZINISCHES OZON? // WHAT IS MEDICAL OZONE?

- ist ein sehr reaktionsfreudiges, drei-atomiges Sauerstoff-Molekül (O^3). // is a highly reactive three-atom oxygen molecule (O^3).
- besteht aus hauptsächlich reinem, medizinischem Sauerstoff und einer bestimmten Menge an Ozon (max. 5%). // consists of mainly pure medical oxygen and a specific amount of ozone (max. 5%).
- ist farblos und erkennbar an seinem charakteristischen Geruch. // is colourless and has a very distinctive odour.
- hat eine stark ausgeprägte bakterizide, viruzide, fungizide und antiparasitäre Wirkung und wird daher seit Jahrzehnten in vielen verschiedenen Bereichen angewendet. // has a strong bactericidal, virucidal, fungicidal and antiparasitic effect and has therefore been used in many different areas for decades.
- wird mit unseren Ozon-Therapiegeräten durch elektrische Entladung erzeugt und als Ozon-Sauerstoff-Gemisch in exakter Konzentration und Dosierung eingesetzt. // is generated with our ozone-therapy-devices by electrical discharge and used as an ozone-oxygen-mixture in an exact concentration and dosage.

HAB[®] HERRMANN HAS BEEN SETTING NEW STANDARDS IN OZONE-OXYGEN-THERAPY SINCE 1984.

**The only manufacturer of hyperbaric devices.
Medically certified.**



SCANNEN FÜR
MEHR INFOS!
SCAN FOR
MORE INFORMATION!



APPLIKATIONS-METHODEN // APPLICATION-METHODS

- ✓ KLEINE EXTRAKORPORALE EIGENBLUTBEHANDLUNG // SMALL EXTRACORPOREAL AUTOHAEMOTHERAPY
- ✓ GROSSE EXTRAKORPORALE EIGENBLUTBEHANDLUNG (hyperbar und normobar) // LARGE EXTRACORPOREAL AUTOHAEMOTHERAPY (hyperbaric and normobaric)
- ✓ REKTALE DARMINSUFFLATION // RECTAL INTESTINAL INSUFFLATION
 - ✓ TRANSCUTANES GASBAD (Beutelbegasung) // TRANSCUTANEOUS GAS BATH (bag gassing)
 - ✓ LOKALE INJEKTIONEN (s.c. / i.m. / i.art. / i.c.) // LOCAL INJECTIONS (s.c. / i.m. / i.art. / i.c.)
- ✓ NASEN-REFLEX-THERAPIE // NOSE-REFLEX-THERAPY
- ✓ HERSTELLUNG VON OZONISIERTEM WASSER // PRODUCTION OF OZONATED WATER

Hyper Medozon *comfort*

Designed für die hyperbare große Eigenbluttherapie mit Therapieprotokoll und Wiederholungsfunktion. Das **Hyper Medozon *comfort*** deckt das komplette Spektrum der Ozon-Sauerstoff-Therapie ab und macht es somit zu einem weltweiten Erfolg.

Designed for hyperbaric large autohaemotherapy with therapy protocol and repeat function. The **Hyper Medozon *comfort*** device covers full spectrum of ozone-oxygen-therapy. This makes it a worldwide success.



Medozon *mini*

Leicht transportabel, eignet sich ideal für den stationären und ambulanten Einsatz. Das **Medozon *mini*** ist geeignet für die Spritzenentnahme, Beutelbegasung, Wasser-ozonisierung (mittels **Aquazon**) und Darminsufflation.

Easy to transport, great for stationary and outpatient use. The **Medozon *mini*** is suitable for syringe withdrawal, bag gassing, water ozonation (with **Aquazon**) and intestinal insufflation.



Medozon *compact*

Zuverlässiges System für die normobare Ozon-Sauerstoff-Therapie. Das **Medozon *compact*** ist durch die vielen Therapiemöglichkeiten ein sehr leistungsfähiges Gerät.

Reliable system for normobaric ozone-oxygen-therapy. The many different therapy possibilities make the **Medozon *compact*** a powerful device.



Medozon *beauty*

Ausgerichtet auf die Spritzenentnahme für ästhetische Behandlungen. Mit dem **Medozon *beauty*** steht erstmals ein Medizinprodukt speziell für Beauty- und Wellnesstherapien zur Verfügung.

Designed for syringe withdrawal in aesthetic treatments. The **Medozon *beauty*** is the first medical product specifically designed for beauty and wellness therapies.



| | Hyper Medozon <small>comfort</small> | Medozon <small>compact</small> |
|--|--|--|
| Maße // Dimensions | 424 x 185 x 388 mm | 424 x 185 x 388 mm |
| Gewicht // Weight | 13,5 kg (inkl. Luftfalle // incl. air trap) | 12,1 kg |
| Spannungsversorgung // Power supply system | 100-240 V / 50-60 Hz | |
| Leistungsaufnahme // Power input | 190 VA | 190 VA |
| Ozon-Konzentration // Ozone-concentration | 0; 2-80 µg/ ml (Regelung über UV-Analyser) stufenlos einstellbar (Control via UV-analyser) infinitely adjustable | 0; 2-80 µg/ ml stufenlos einstellbar // infinitely adjustable |
| Durchfluss // Flow rate | 1,0 l/ min | 1,0 l/ min |
| Farbvarianten // Colour options | grün oder silber // green or silver | grün oder silber // green or silver |
| Applikations-Methoden // Application-Methods | <ul style="list-style-type: none"> • Hyperbare & normobare große Eigenblut-Therapie // Hyperbaric and normobaric large autohaemotherapy • Kleine Eigenbluttherapie // Small autohaemotherapy • Spritzenentnahme // Syringe withdrawal • Dauerbegasung // Permanent gassing • Darminsufflation // Intestinal insufflation • Wasserozonisierung // Water ozonation | <ul style="list-style-type: none"> • Sämtliche Anwendungen im normobaren Bereich // Suitable for all types of normobaric ozone treatments • Spritzenentnahme // Syringe withdrawal • Dauerbegasung // Permanent gassing • Darminsufflation // Intestinal insufflation • Wasserozonisierung // Water ozonation |
| Vakuumpfunktion // Vacuum function | Ja // yes | Ja // yes |
| Sonstige Informationen // Further information | <ul style="list-style-type: none"> • Mehrsprachige, einfache Bedienung über Touchscreen // Multilingual, easy to use by touchscreen • Konzentration über Nummern-tasten stufenlos einstellbar // Concentration with number keys infinitely adjustable • Aquazon ist anschließbar // Suitable for connecting the Aquazon • Integrierter Analyser zur Messung & Regelung der eingegebenen Ozon-Konzentration // Integrated analyser for measuring and regulating of the entered ozone-concentration • Geschlossenes System // Closed system • Kann auf Ozon-Gerätewagen WEIKO gestellt werden // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO | <ul style="list-style-type: none"> • Mehrsprachige, einfache Bedienung über Touchscreen // Multilingual, easy to use by touchscreen • Konzentration über Nummern-tasten stufenlos einstellbar // Concentration with number keys infinitely adjustable • Aquazon ist anschließbar // Suitable for connecting the Aquazon • Kann auf Ozon-Gerätewagen WEIKO gestellt werden // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO • Transportabel mit Transportkoffer // Transportable with transport case |
| Medizinische Produktklassifizierung // Medical product classification | II b | |



Transportkoffer // Transport case
S / M



Ozon-Gerätewagen WEIKO // **Ozone-Cart WEIKO**


| | Medozon <small>mini</small> | Medozon <small>beauty</small> |
|--|---|--|
| Maße // Dimensions | 337 x 159 x 348 mm | 337 x 159 x 348 mm |
| Gewicht // Weight | 7,4 kg | 7,5 kg |
| Spannungsversorgung // Power supply system | 100-240 V / 50-60 Hz | |
| Leistungsaufnahme // Power input | 140 VA | 100 VA |
| Ozon-Konzentration // Ozone-concentration | 0; 5-60 µg/ ml stufenlos einstellbar // infinitely adjustable | 0; 2-20 µg/ ml stufenlos einstellbar // infinitely adjustable |
| Durchfluss // Flow rate | 0,6 l/ min | 0,6 l/ min |
| Farbvarianten // Colour options | grün // green | grün // green |
| Applikations-Methoden // Application-Methods | <ul style="list-style-type: none"> • Normobare große und kleine Eigenblut-Therapie // Normobaric small and large autohaemotherapy • Spritzenentnahme // Syringe withdrawal • Darminsufflation // Intestinal insufflation • Wasserozonisierung // Water ozonation | <ul style="list-style-type: none"> • Spritzenentnahme // Syringe withdrawal |
| Vakuumpfunktion // Vacuum function | Nein // No | Nein // No |
| Sonstige Informationen // Further information | <ul style="list-style-type: none"> • Mehrsprachige, einfache Bedienung über Touchscreen // Multilingual, easy to use by touchscreen • Konzentration über Nummerntasten stufenlos einstellbar // Concentration with number keys infinitely adjustable • Aquazon ist anschließbar // Suitable for connecting the Aquazon • Kann auf Ozon-Gerätewagen WEIKO gestellt werden // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO • Transportabel mit Transportkoffer // Transportable with transport case | <ul style="list-style-type: none"> • Mehrsprachige, einfache Bedienung über Touchscreen // Multilingual, easy to use by touchscreen • Konzentration über Nummerntasten stufenlos einstellbar // Concentration with number keys infinitely adjustable • Kann auf Ozon-Gerätewagen WEIKO gestellt werden // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO • Transportabel mit Transportkoffer // Transportable with transport case |
| Medizinische Produktklassifizierung // Medical product classification | II a | |



Medozon shaker



Aquazon

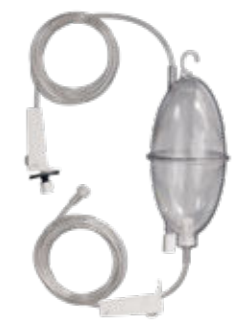

Medozon i-set

Weiteres Zubehör erhältlich // Other accessories available

HERRMANN APPARATEBAU GMBH

Im Höning 3
63820 Elsenfeld
Germany

T +49 (0) 6022 6581-3
F +49 (0) 6022 6581-59

info@hab.gmbh
www.h-a-b.de

